

1801

PRECI-VERTIX STANDARD

6 patryc z utrzymywaczem do paralelometru
6 żółtych matryc
1 sztyft do wciskania matrycy



1811

PRECI-VERTIX P


6 patryc podciętych z optymalnym
dopasowaniem do dziąsła
6 żółtych matryc
1 sztyft do wciskania matrycy
1 sztyft dla patrycy do paralelometru



1812

PRECI-VERTIX P COMBI

2 patryc podciętych z optymalnym
dopasowaniem do dziąsła
2 + 2 + 2 matryc
2 łoża matrycy do odlania
1 sztyft do wciskania matrycy
1 sztyft dla patrycy do paralelometru

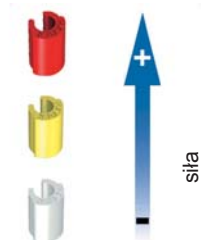**CZĘŚCI DODATKOWE****Normalna siła:**

1802 6 żółtych matryc
1802B 50 żółtych matryc

Słaba siła:

1805 6 białych matryc
1805B 50 białych matryc

Duża siła:

1806 6 czerwonych matryc
1806B 50 czerwonych matryc

Opakowanie mieszane:

1807 2 z + 2 c + 2 b
1807B 25 z + 15 c + 10 b

PRECI-VERTIX ŁOŻA

1808 6 łoża matryc do odlania
1808B 50 łoża matryc do odlania

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADIKULÄR
PRECI-BALL

CEKA EXTRACORONAL
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP


PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi

01.
AXIAL
ATTACHMENTS02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS03.
PROFILE
ATTACHMENTS

SPECIALTIES

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTSPRECI-VERTIX®
POLSKI

WWW.CKPL.EU

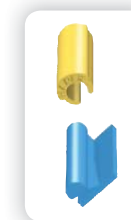

CEKA PRECI-LINE APP



SWISS MADE CE 0470 PC



Prospekt nr. 262.PL-ed.B
© Copyright ALPHADENT NV 9/2014 · BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk
ALPHADENT NV · Mannebeekstraat 33 8790 Waregem, Belgium
T +32 56 629 531 · E info@ckpl.eu

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE


PRECI-VERTIX

- ✓ Prosta technologia
- ✓ Estetyczny: stosować przy zachowanych zębach przednich
- ✓ Minimalna obsługa po wykonaniu
- ✓ Dowolny sposób odlewania
- ✓ Niedrogi
- ✓ Wysoki komfort noszenia
- ✓ 40 letnie doświadczenia kliniczne



sila

PRECI-VERTIX gwarantuje trwałą retencję i doskonałą boczną stabilność. Elastyczne matryce dające się łatwo wymieniać. Matryce są dostępne w 3 rodzajach siły utrzymującej.

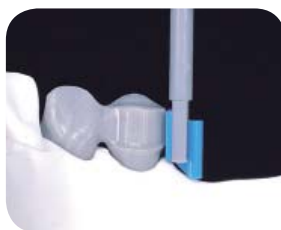

Proszę ustawić równoległość patrycy do zęba filarowego. Istnieje możliwość skrócenia patrycy do 3 mm. Zalecamy wykonanie podparcia. Proszę odlać i obrobić wymodelowane elementy. Następnie nałożyć żółtą matrycę na zasuwę i zablokować podcienia i przystąpić do powielenia modelu. Wykonać model z masy ognioodpornej i wymodelować protezę z wosku odlewniczego.



Pokryć woskiem powieloną matrycę i wymodelować protezę. Całość zalać masą w pierścieniu odlewniczym i odlać. Opracować i wypolerować odlaną protezę. Wypiaszkować łożo na matrycę, nie polerować tego miejsca. Skrócić patrycę okluzalnie o 0,2 mm aby zasuwa nie przenosiła obciążeń. Wcisnąć matrycę do łoża przy pomocy specjalnego sztyftu. Aby usunąć matrycę należy wziąć ostre narzędzie i wysunąć matrycę.

ZASTOSOWANIE OBUDOWY DO MATRYCY PRECI-VERTIX POLECANE TECHNIKI

Całkowicie spalające się tworzywo gwarantując dobre dopasowanie do matrycy i optymalna estetykę.



Proszę używać białej matrycy (# 1805) do pracy. Przed dalszą pracą dopasować na wysokość i do dziąsła obudowę matrycy. Nałożyć na zasuwę. Domodelować kształt pod ceramikę lub kompozyt. Zamontować kanał odlewniczy. Po zdjęciu obudowy wyjąć matrycę przy użyciu ostrego instrumentu. Odląć element. Po odlaniu obrobić i pokryć porcelaną lub kompozytem. Zamontować element do protezy szkieletowej.